



Manual do usuário


**Refil para Escova de
Dente Elétrica
Mi Electric Toothbrush T100**

Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Como usar	03
03. Precauções	04
04. Avisos	04
05. Especificações	05
06. Descarte ecológico	05
07. Canais de atendimento	06

Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

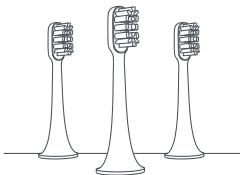

Refil para Escova de Dente Elétrica
Mi Electric Toothbrush T100

01. Visão geral do produto




- Cerdas com agrupamento de alta densidade que possuem 20% a mais de filamentos e intensificam a limpeza;
- Formato arredondado e compacto, que facilita o alcance de escovação até mesmo nas regiões de difícil acesso;
- Higienização dos dentes e gengiva com suavidade, eficácia.

02. Como usar


• Instalando o refil:

Fixe o refil da escova no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto.

O encaixe correto, garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor. Veja:

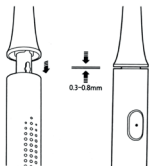

- Aplicando pasta de dente na escova:

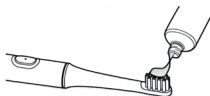

Molhe as cerdas da escova de dente e coloque a pasta sobre as mesmas.

- **Escove seu dente de forma saudável:**

Mova lentamente a escova de dente, enquanto mantém a angulação de 45° entre as cerdas e as linhas da gengiva.

- **Limpendo o refil:**

a. Após a escovação, posicione o refil embaixo de água corrente;

b. Após a limpeza, cubra as cerdas com a capa de proteção para mantê-las limpas e higienizadas.

03. Precauções

- Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incômodos. Isso acontece porque sua gengiva não está habituada com a eficiência desta escovação;
- Este sintoma, geralmente desaparece no período de 1 a 2 semanas;
- Se os incômodos persistirem após esse período, pare de usar sua Mi Electric Toothbrush T100 Head e procure um dentista;
- Recomendamos que use o modo de baixa intensidade de vibração inicialmente.

04. Avisos

Usuários que estiverem sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem

usar o produto sob orientação dos dentistas;

- Este produto foi criado apenas para limpezas de dentes, gengivas e língua;
- Não utilize para qualquer outro propósito;
- Se você sentir qualquer desconforto ou dor, imediatamente interrompa o uso do produto e consulte um dentista;
- O refil da escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas;
- Caso o refil apresente qualquer sinal de defeito, pare de utilizá-la imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.

05. Especificações técnicas

Material: Filamentos plástico, resistente a bactérias e fungos.

Compatibilidade: Mi Electric Toothbrush T100

06. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a

lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

07. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.