



Manual do usuário

Massageador Corporal Xiaomi M352


Sumário

01.	Visão geral do produto	03
02.	Como montar	04
03.	Como utilizar	05
04.	Indicadores	07
05.	Como massagear	08
06.	Limpeza e armazenamento	09
07.	Resolução de problemas	10
08.	Instruções de segurança	11
09.	Especificações técnicas	13
10.	Descarte ecológico	14
11.	Canais de atendimento	15

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

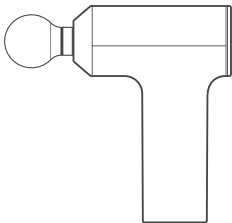


Massageador Corporal Xiaomi M352

01. Visão geral do produto

Este produto é indicado para:

- Alívio de dores musculares decorrentes da prática de exercícios físicos;
- Alívio da dor ou tensão muscular na região da coluna e ombros, decorrentes de má postura;
- Auxílio no relaxamento muscular através de massagens diárias.

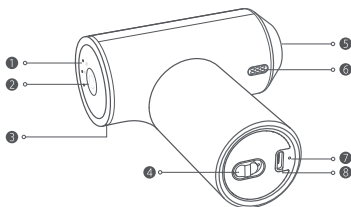


1. Indicadores de velocidade
2. Botão de velocidade
3. Indicador do sensor de pressão
4. Botão de liga/desliga

5. Boca para instalação das ponteiros
6. Respiradouro de dissipação de calor
7. Indicador de nível de bateria
8. Entrada de carregamento



Massageador

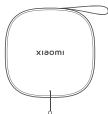

Bolsa de armazenamento



Cabo de carregamento



Manual do usuário



Ponteira redonda



Ponteira em forma de U




Ponteira plana



Aviso de garantia

- **Ponteira redonda:** Indicado para massagear grandes grupos musculares, como ombros, cintura, braços, quadril, coxas e panturrilha.
- **Ponteira em formato de U:** Indicada para massagear as costas, laterais da coluna e panturrilhas.
- **Ponteira plana:** Indicada para relaxamento de todos os músculos.

02. Como montar

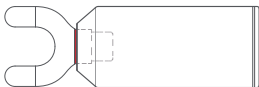


Escolha a ponteira de massagem de acordo com o tipo de músculo. Empurre a ponteira no local indicado até que linha de marcação da ponteira esteja alinhada conforme ilustração acima.

Notas

- A cor vermelha na ilustração acima representa a linha de marcação encontrada na ponteira em tom similar ao restante do produto.
- Para retirar a ponteira, desligue o produto, segure firme e gire-a para a esquerda, puxando para fora do massageador.
- Antes de montar ou desmontar as ponteiros no produto, certifique-se que o produto está desligado. Certifique-se que a ponteira está bem encaixada antes

de iniciar a utilização. Para evitar acidentes, não ajuste, altere, monte ou desmonte as ponteiros durante seu funcionamento.

03. Como utilizar

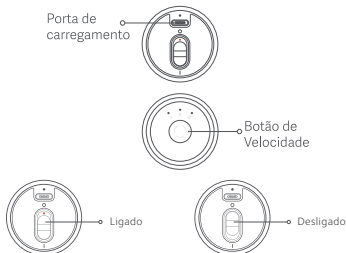

Carregando o produto: certifique-se que o massageador está desligado, conecte a ponta USB-C do cabo de carregamento à porta de carregamento na parte inferior do massageador. Conecte a ponta USB do cabo de carregamento à fonte de energia.

Para uma maior segurança, o produto não inicia seu funcionamento durante o carregamento.

Ligando o produto: empurre o botão de ligar/desligar que se encontra na parte inferior do massageador, para a posição "I" até que a indicação em vermelho fique exposta.

Os três indicadores de velocidade acenderão simultaneamente. Após piscar uma vez, os indicadores das velocidades 2 e 3 se apagam para que a velocidade 1

possa ser iniciada.

Caso o produto seja utilizado de modo contínuo por 15 minutos, o massageador entra em estado de espera inteligente, onde basta acionar o botão de velocidade para retomar o uso.

Desligando o produto: com o massageador ligado, mova o botão de ligar/desligar que se encontra na parte inferior do massageador, para a posição "0" até que a indicação em vermelho fique oculta.

Os três indicadores de velocidade se apagarão simultaneamente e o produto estará desligado.

Ajustar a velocidade: para alterar a velocidade, pressione o botão de velocidade que se encontra na parte posterior do produto. Os três indicadores representam as velocidades 1, 2 e 3.

Pausar: pressione duas vezes o botão de velocidade que se encontra na parte posterior do produto. Para retomar o funcionamento, basta pressionar novamente uma vez. A fim de preservar a bateria, o produto conta com um sistema de desligamento automático caso não ocorra qualquer operação após 10 minutos. Basta retornar o botão de ligar/desligar a posição "0" e depois mover novamente a posição "1".

Reiniciando após bloqueio e parada: caso a pressão exercida sobre a ponteira seja muito alta, o massageador ativará a proteção de bloqueio e parada para preservar seu sistema. O massageador retorna automaticamente a velocidade 1 e basta pressionar por uma vez o botão de velocidade para retomar o uso.

04. Indicadores



Indicador do sensor de pressão: a parte posterior do produto conta com um círculo luminoso que indica a intensidade da massagem.



Branco



Laranja

Indicador apagado: Intensidade baixa, o massageador proporciona uma massagem suave.

Indicador acesso em branco: Intensidade moderada, o massageador proporciona um efeito de massagem normal.

Indicador acesso em laranja: Intensidade alta, o massageador pode ser ajustado de acordo com a necessidade do usuário, para evitar danos ao músculo por pressão excessiva.

Indicador de carga: na parte inferior do produto, próximo a porta de carregamento, se encontra o indicador de carga que representa a quantidade de bateria existente no produto.



Piscando em vermelho: a bateria está abaixo de 20%. É indicado o carregamento assim que possível.

Piscando em branco: carregamento do produto em andamento.

Apagado durante o carregamento: carregamento completo, é indicado retirar o cabo de carregamento. Caso se mantenha carregando após 100% de bateria, o indicador irá piscar por 20 segundos e depois se apagar.

05. Como massagear

Instale a ponteira desejada, ligue o massager e selecione uma velocidade satisfatória de acordo com a experiência de uso e o músculo que receberá a massagem. Recomenda-se iniciar pela velocidade mais baixa.

Direcione o massager em contato com a parte que deseja relaxar, pressionando e movendo suavemente a ponteira ao longo do músculo.

Para evitar danos ao músculo, não é aconselhável pressionar o massager com força excessiva, pois o produto já possui a força motriz adequada para a atividade.

A duração recomendada de uso do produto é de 10 minutos, com massagens de 1 minuto em cada zona

que possua uma cobertura muscular razoável. É recomendado que cada utilização não exceda o máximo de 15 minutos.

06. Limpeza e armazenamento

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja desligado (com o botão na posição "0") e que não está conectado ao adaptador de energia.
- Utilize um pano limpo levemente umedecido para a limpeza do massager e ponteiros. Seque-os com um pano seco ou uma toalha de papel antes de guardá-los.
- A fim de preservar seu material, não jogue água diretamente nem exponha ao sol as ponteiros.
- Não utilize líquidos corrosivos para limpar o produto e suas partes, pois pode danificá-las, rachá-las ou alterar sua cor.
- Guarde o massager em local fresco e seco. Mantenha-o longe de umidades, fontes de água ou de fogo, e de ambientes corrosivos.
- Não armazene o massager a temperaturas superiores a 40°C ou inferiores a -10°C.
- Para viagens ou períodos sem uso, dê preferência para o armazenamento do massager e acessórios na bolsa de armazenamento que acompanha o produto. Antes de retomar o uso, carregue o produto novamente.
- Não bata, aperte, arranhe ou deixe cair o produto.
- Se o produto apresentar qualquer variação de estado, temperatura, desempenho, durante seu uso ou armazenamento, entre em contato com o pós-vendas.

07. Resolução de problemas

Problemas	Causas prováveis	Soluções
O indicador de carga não liga durante o carregamento	A fonte ou o cabo não estão corretamente conectados e o massageador não está recebendo carga.	O indicador de carga está apagado pois a bateria está totalmente carregada.
	Certifique-se que a fonte de energia está ligada e se ela e o cabo estão conectados corretamente.	Desconecte o cabo e utilize o massageador normalmente.
A bateria está demorando para completar a carga	A temperatura da bateria interna pode estar muito quente ou muito fria.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal para retomar a utilização.
	A fonte de alimentação está fora da especificação correta.	Utilize a fonte de alimentação adequada.
O massageador não está funcionando	O massageador está sem bateria.	Carregue o massageador com uma fonte de energia adequada antes de sua utilização.
	O massageador ativou a proteção de bloqueio e parada para preservar seu sistema.	Pressione por uma vez o botão de velocidade para retomar o uso, o massageador retorna automaticamente à velocidade 1.
A temperatura do massageador está muito alta	O tempo em utilização está longo.	Aguarde até que a temperatura retorne ao normal antes de utilizar o produto. O tempo de duração recomendado é de no máximo 15 minutos por massagem, para que o sistema não sobrecarregue.

Nota: se os problemas acima persistirem, suspenda a utilização e obtenha orientações através dos canais de atendimento indicados neste manual.

08. Instruções de segurança

Restrições de utilização

- Não utilize o massageador na cabeça, rosto, cotovelos, joelhos e outras articulações, coluna vertebral ou outras zonas ósseas com pouca cobertura muscular.
- Não utilize o massageador na parte lateral, anterior (vertebras cervicais) ou posterior do pescoço para evitar desmaios ou parada cardíaca.
- Não utilize o massageador nas axilas, região interna do braço, região interna da clavícula, região interna do cotovelo, na parte de trás do joelho, no abdômen, próximo aos rins, na zona genital ou outras zonas delicadas com grande concentração de nervos e vasos sanguíneos.
- Não utilize o massageador abaixo do abdômen de pessoas com doenças urinárias.
- Não utilize o massageador em zonas do corpo com hematomas ou dores, feridas superficiais, inchado, desconforto, inflamação, espasmos musculares, lesões musculares, entorses, contusões ou distensões.
- Não utilize o massageador se surgir sintomas como febre, náuseas, vômitos, dor ou fraqueza muscular após exercício intenso. Nestes casos aconselha-se a procura de assistência médica.
- Não utilize o massageador em pessoas com doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças sanguíneas, púrpura trombocitopenia, estenose carotídea, varizes, trombose venosa, cancro, tumores e doenças mentais.
- Não utilize o massageador em pessoas com fraturas ou implantes metálicos.
- Não utilize o massageador enquanto conduz ou realiza operações de precisão.
- Não utilize o massageador continuamente durante

um período de tempo prolongado, de forma a prevenir danos musculares causados por massagem excessiva.

Precauções

- Não coloque os dedos, cabelo ou outras partes do corpo perto da conexão entre a ponteira e a boca de encaixe das ponteiros durante o seu funcionamento.
- Não bloqueie nem insira objetos estranhos no encaixe das ponteiros ou na porta de carregamento. Caso contrário, poderá ocorrer queimaduras, choques elétricos ou incêndios por curto circuito.
- Não mergulhe o massageador em água ou outros líquidos.
- Não utilize e não armazene o massageador em ambientes úmidos.
- Utilize e carregue o produto em temperatura ambiente entre 0°C e 35°C.
- Mantenha o massageador afastado de fontes de água ou fogo, bem como de ambientes corrosivos, para não afetar o desempenho da bateria.
- Não tente reparar, desmontar ou alterar o massageador.
- Não utilize o massageador durante seu carregamento.
- Utilize o cabo de carregamento original para carregar de acordo com as especificações deste manual. Aconselha-se remover o massageador do cabo de carregamento após atingir carga total.
- O produto possui peças em silicone. Se houver alergia ao material, deve-se evitar o uso das ponteiros redonda e em formato de U.

09. Especificações Técnicas

Nome: Massageador Corporal Xiaomi M352

Modelo: XMFG-M352

Entrada nominal: 5V  2A

Dimensões do produto: 10,1 x 13,9 x 4,5cm

Capacidade da bateria: 2600 mAh

Temperatura de funcionamento: 0°C a 35°C

Entrada: Tipo-C

Tipo de bateria: Íon de lítio recarregável

Umidade operacional: de 10% a 85%RH

Autonomia:

- Até 35 dias na intensidade mais leve com uso diário de 10 minutos;
- 13 horas em baixa velocidade sem carga, 5 horas e 50 minutos em baixa velocidade com carga de 3 kg.

O produto não acompanha fonte de alimentação, que deve ser adquirida separadamente.

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900

Para promover a proteção ao meio ambiente, evitamos o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.