



Manual do usuário

**Escova de dente elétrica**  
**Mi Electric Toothbrush**

## Sumário:

01. Precauções	3
02. Aviso	3
03. Proibições	3
04. Visão geral do produto	4
05. Como usar	5
06. Instalação do aplicativo Mi Home	8
07. Sincronização de Dados	10
08. Visão de relatório e configuração de funções	10
09. Proteção ao Meio Ambiente	10
10. Especificações	12
11. Lista de falhas do produto	12
12. O que a garantia não cobre	12
13. Canais de Atendimento	13

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

## 01 Precauções

---

⚠ Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incomodado. Isto acontece, porque sua gengiva não está acostumada com a eficiência desta limpeza. Recomendamos que você use o modo favorito da escova de dente. Este sintoma geralmente desaparece em 1 ou 2 semanas. Se persistir após esse período, pare de usar sua Escova de Dente Inteligente e procure um dentista.

## 02 Aviso

---

- a. Usuários que estão sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem usar o produto sob orientação dos dentistas.
- b. A Escova de Dente Inteligente, cumpre com padrões de segurança de dispositivos eletromagnéticos. Para quaisquer dúvidas sobre marcapassos ou outros implantes, consulte seu médico ou fabricantes de implantes antes de usá-la.
- c. Este produto foi criado apenas para limpeza de dentes, gengivas e língua. Não use para qualquer outro propósito. Se você sentir qualquer desconforto ou dor, imediatamente pare o uso deste produto e consulte seu dentista.

## 03 Proibições

---


1. Não imerja a entrada de carregamento na água ou em qualquer outro líquido.
2. Após a limpeza, cheque se o plug de energia da entrada de carregamento está completamente seco. Em seguida, conecte o plug à fonte de energia.
3. Este produto contém baterias internas recarregáveis. Não deixe a Mi Electric Toothbrush em ambientes que apresentem altas temperaturas.
4. Caso a escova apresente qualquer sinal de defeito, pare de utilizá-la e entre em contato com a nossa assistência.
5. Não deixe a escova exposta ao sol principalmente quando for carregá-la.
6. Não use a escova durante o banho.

## Dicas

- Esta escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas;
- Após o carregamento da escova, retire a fonte da tomada;
- Não coloque objeto de metal na base de carregamento, quando estiver conectada a uma fonte de energia.

## 04 Visão geral do produto

⚠ Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incomodado. Isto acontece, porque sua gengiva não está acostumada com a eficiência desta limpeza. Recomendamos que você use o modo favorito da escova de dente. Este sintoma geralmente desaparece em 1 ou 2 semanas. Se persistir após esse período, pare de usar sua Escova de Dente Inteligente e procure um dentista.

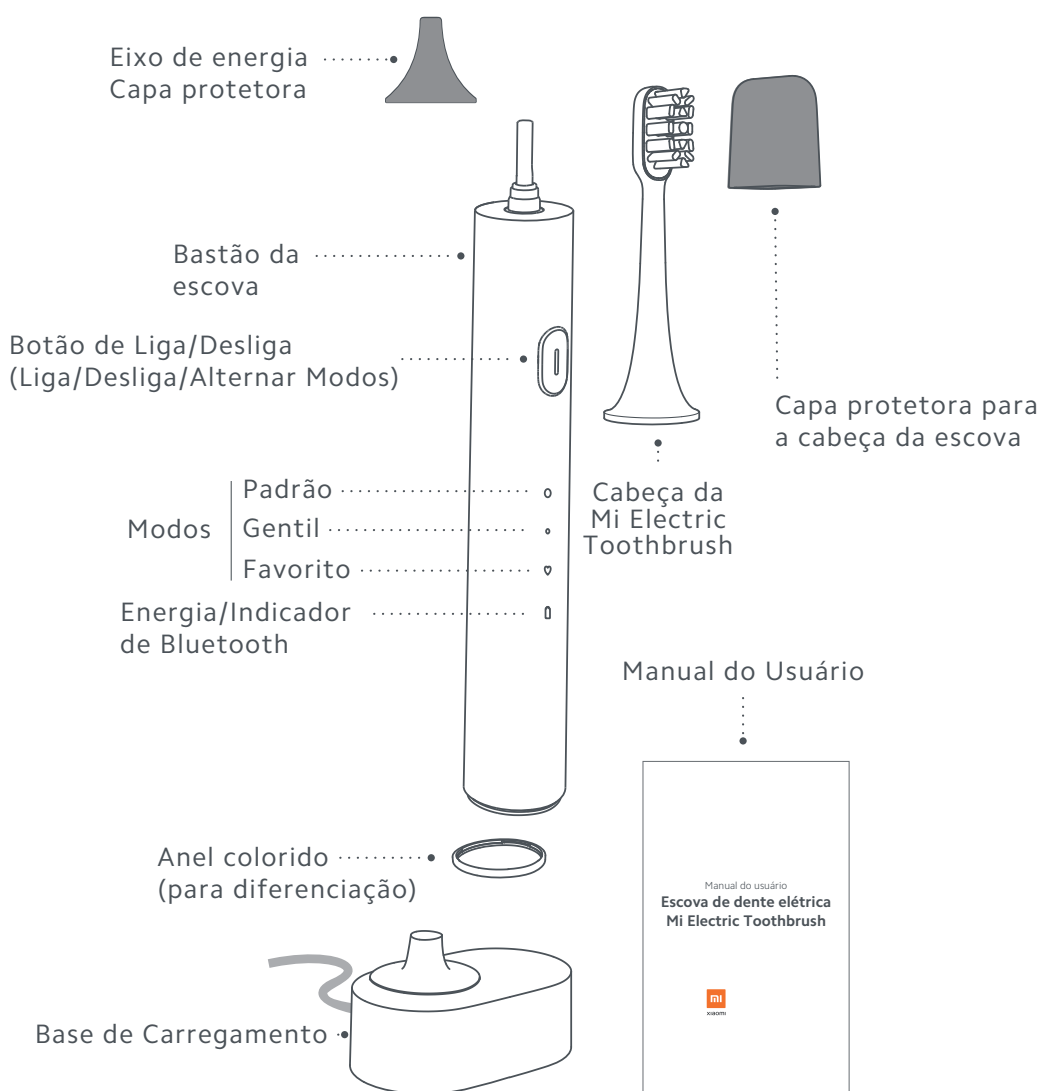

## 05 Como usar

---


Dicas:

Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incomodado. Isto acontece porque suas gengivas não estão acostumadas com a eficiência desta limpeza. Recomendamos que você use o modo favorito da escova de dente e altere para outros modos após um período para que a transição da escova manual para a escova elétrica aconteça. O sintoma geralmente desaparece em 1 ou 2 semanas, porém se persistir, pare de usar a escova elétrica e consulte um dentista.

### a. Instalando a cabeça da Mi Electric Toothbrush


Fixe a cabeça da escova de dente no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto.

(O encaixe correto garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor.)

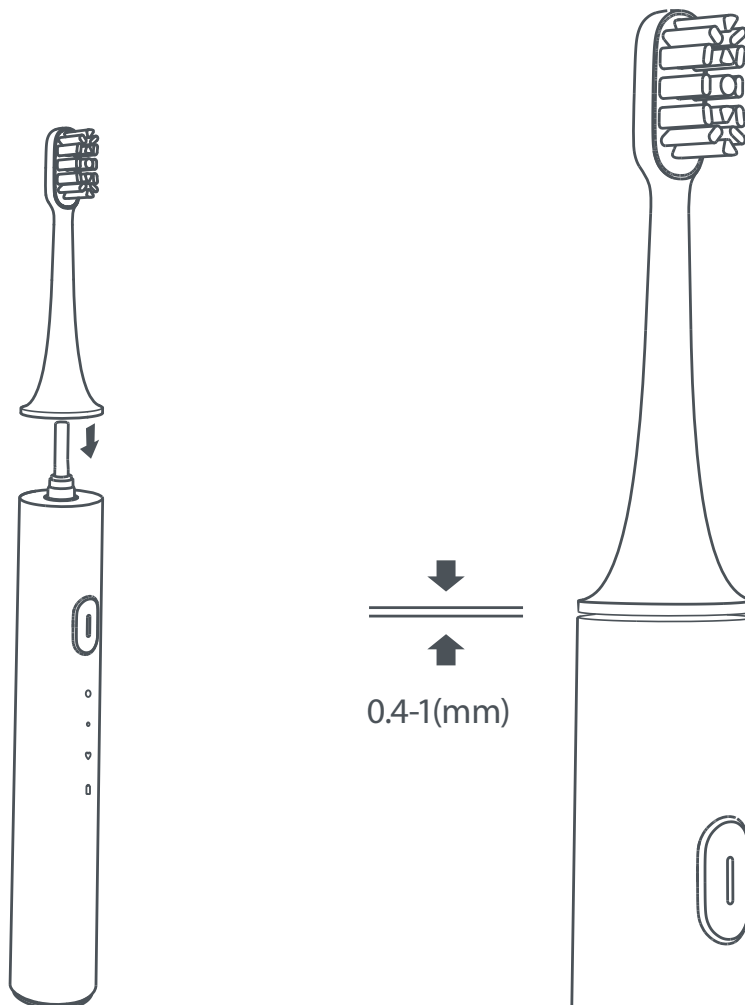


## b. Instalação e Reposição de anel colorido

- Substitua os anéis por cores variadas que forem de sua preferência. Estes anéis, melhoram a identificação de sua escova;
- Removendo o anel colorido: Segure a escova de dente com a mão esquerda, pressione contra a parte traseira (texturizada) da escova e com o polegar esquerdo, pressione contra o orifício dentro do bastão. Com o dedo indicador, insira a unha do polegar no espaço entre o anel colorido e a alça, empurre o anel da cor para cima com um pouco de força para removê-lo.
- Instalando um anel colorido: Mantenha as estruturas do clip do anel colorido para baixo e combine os três clips do anel com os clips do bastão. Ambos se aproximam de um formato triangular, que se encaixam perfeitamente. Pressione o anel colorido para baixo, exercendo um pouco de força para instalá-lo corretamente.

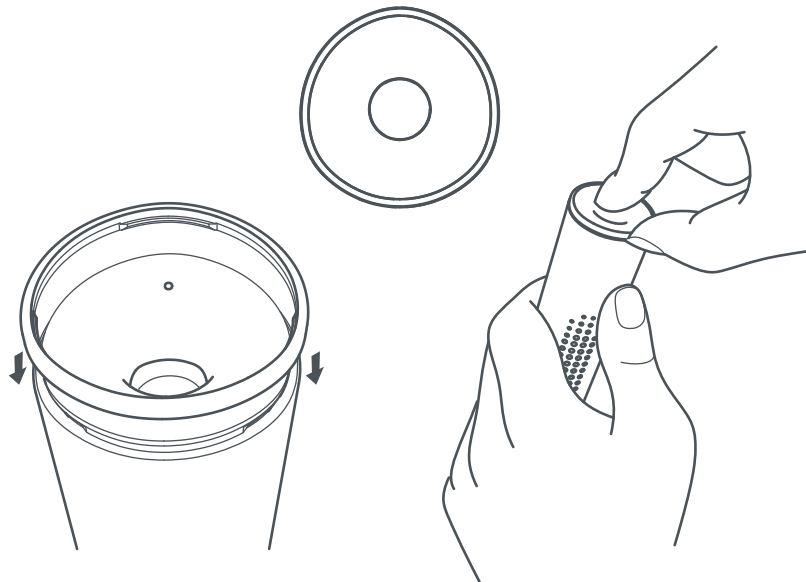

## c. Aplicando pasta de dente na escova

Molhe as cerdas da escova de dente e passe a pasta sobre as cerdas.

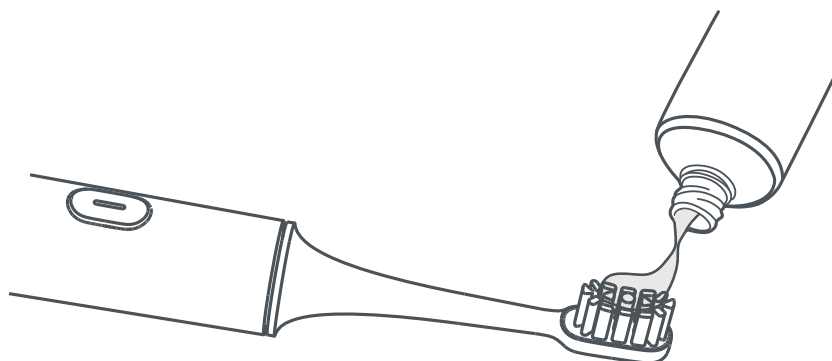



#### d. Selecione um Modo



- Ligando: Pressione o botão brevemente para ligar;
- Alternando Modos: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botão de alternar modo;
- Pausa: Pressione o botão por 1 segundo para pausar o dispositivo. Automaticamente, o dispositivo desliga quando nenhuma operação é realizada após 30 segundos no estado de pausa;
- Desligando: Com a escova ligada, altere a chave para desligar passando pelo modo Favorito;
- Em circunstâncias especiais, pressione e segura o botão por 12 segundos para restaurar as configurações de fábrica. (para prevenir erros e sincronizar dados no smartphone via Bluetooth.)

#### e. Escove seu dente de forma saudável


- Mova devagar a escova de dente enquanto mantém um ângulo de  $45^\circ$  entre as cerdas da escova e as linhas da gengiva;
- Você pode pressionar o botão de Liga/Desliga durante a escovação, para alterar livremente o modo;
- Durante a escovação, a escova para de vibrar a cada 30 segundos para indicar que você a mude a posição;
- Se a escova não pausar, o dispositivo automaticamente desliga após o fim do modo escovação (o modo escovação pode ser configurado no aplicativo).

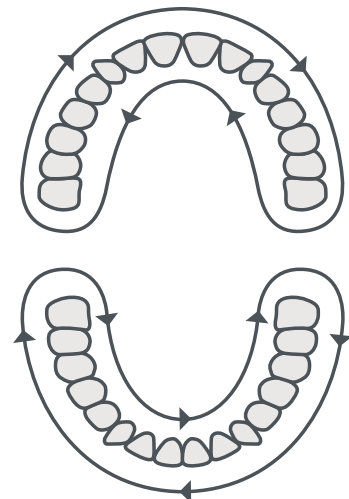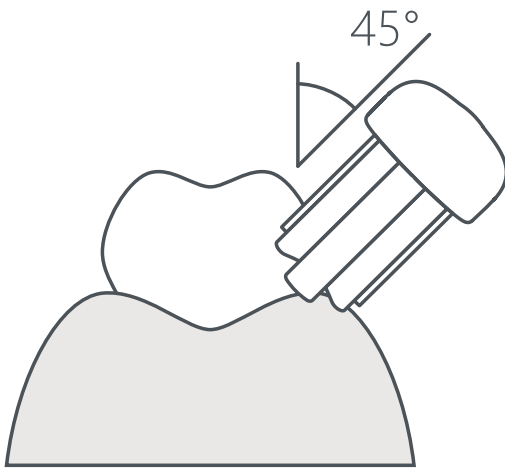



#### f. Limpe a Cabeça da Escova de dente

- Após a escovação, coloque a cabeça da escova embaixo de água corrente;
- Após a limpeza, cubra a cabeça da escova com a capa protetiva para mantê-la limpa e higiênica;

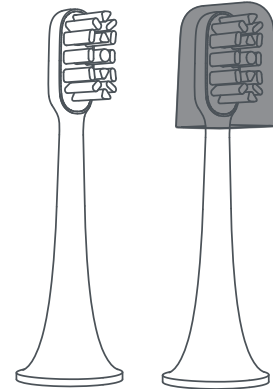

Dentistas advertem a substituição da cabeça da escova de dente a cada 3 meses.

## 06 Instalação do aplicativo Mi Home

---

Controle seu dispositivo e interaja com outros dispositivos Smart Home através do aplicativo Mi Home.

a. Para instalar o aplicativo Mi Home, escaneie o QR Code abaixo ou vá até a App Store (iOS) ou Play Store (Android) e busque por Mi Home;




b. Abra o aplicativo Mi Home, toque no “+” no canto direito da tela, selecione a opção Add Manually, encontre o seu produto na categoria Health e selecione-o;

c. Para parear, segure por 3 segundos o botão e aguarde o término do pareamento;

## f. Limpe a Cabeça da Escova de dente

- Após a escovação, coloque a cabeça da escova embaixo de água corrente;
- Após a limpeza, cubra a cabeça da escova com a capa protetiva para mantê-la limpa e higiênica;

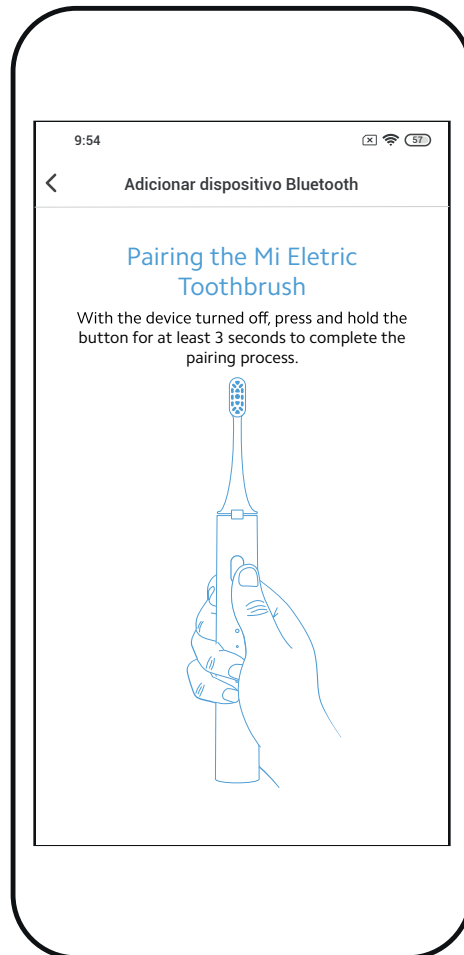

Nota: Devido as constantes melhorias sendo implementadas no servidor Brasil, em caso de instabilidade ao encontrar dispositivos, é recomendado o uso de outro servidor. Para isso, no aplicativo Mi Home, entre em configurações/região e altere para Singapore.

A versão do Mi Home poderá ser atualizada sem aviso prévio. Siga as instruções baseadas na versão atual do aplicativo. Garanta que seu Wi-Fi esteja disponível e conectado.


É recomendada a sincronização da Mi Electric Toothbrush com o Mi Home a cada dois dias.

A escova de dente não pode ser iniciada quando estiver conectada a um smartphone via Bluetooth e não pode ser conectada a um smartphone via Bluetooth em modo de uso.


## 07 Sincronização de Dados

---

Baixe o aplicativo Mi Home, registre uma conta Mi e faça login com esta conta. Acesse "Meus dispositivos" e toque em dispositivo na lista de dispositivos.

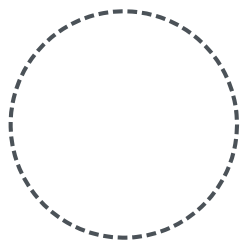

Mova a escova de dente para perto do smartphone

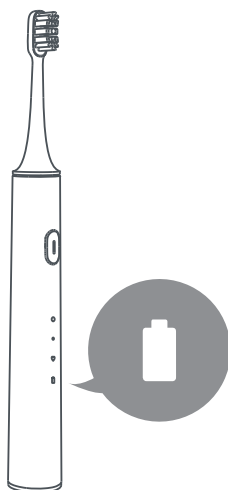

Deslize para baixo para sincronizar os dados.



A sincronização de dados está completa.

## 08 Visão de relatório e configuração de funções

---

- Altere para o modo favorito(♡) ;
- Os dados de escovação e os relatórios de análises são exibidos na tela;
- Veja os dias de serviço da cabeça da escova de dente.

## 09 Proteção ao Meio Ambiente

---

As baterias de lítio recarregáveis contidas dentro deste produto, podem possuir substâncias poluidoras. Antes de descartar o produto, certifique-se de remover as baterias e enviá-las para o centro de coletas de baterias da sua cidade.

## Possíveis Falhas

Falha	Possível causa
Este dispositivo não pode ser ligado.	Dispositivo em carregamento; dispositivo conectado via Bluetooth; O nível de bateria está baixo.
A escova de dente não pôde ser instalada no eixo de energia.	O orifício da escova está obstruído por objetos; pasta de dente ou outras substâncias estão grudadas no eixo; a cabeça da escova de dente não é uma autêntica Mi.
O consumo de energia é rápido e o dispositivo precisa ser carregado com frequência.	Este dispositivo está conectado via Bluetooth por um longo período; O dispositivo é usado com frequência.
A vibração da escova está fraca.	A cabeça da escova de dente não está instalada no lugar correto; Objetos estranhos estão entre a cabeça da escova e o bastão.
O aplicativo não pode ser conectado à Mi Electric Toothbrush.	O Bluetooth está desabilitado; A escova não está próxima ao smartphone; a escova está em estado de vibração.

## 10 Especificações

---

### a. Mi Electric Toothbrush

Modelo: DDYS01SKS

Tensão nominal: 3.7v

Potência nominal: 2W

Tempo de carregamento: Aproximadamente 12 horas

IP: IPX7

### b. Base de carregamento

Modo de carregamento: Indutivo

Avaliação IP: IPX7

Entrada: 5VDC / 0,5 A

## 11 Lista de falhas do produto

---

### Defeitos de Performance

- 1.O dispositivo não pode ser ligado e desligado normalmente.
- 2.A vibração da cabeça da escova está anormal.
- 3.O dispositivo não pode ser conectado via Bluetooth.
- 4.O carregamento está anormal.
- 5.O indicador está desligado.

## 12 O que a garantia não cobre

---


1. A garantia não cobre produtos que foram reparados sem autorização, mau utilizado ou negligenciado, casos de entrada de líquidos no produto, produtos que forem alterados, uso incorreto dos acessórios, se possuem marcas ou se as etiquetas de anti falsificação tiverem sido retiradas ou violadas.
2. Se o produto estiver fora do período de validade dos serviços de “reparo, substituição e garantia.”
3. Se o produto estiver danificado devido a forças maiores.
4. Se a falha do produto não estiver inclusa na lista de falhas de performance.
5. Falhas relacionadas a mau uso.

## 14 Canais de Atendimento

---

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br), onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 [atendimentoxiaomi@dl.com.br](mailto:atendimentoxiaomi@dl.com.br)

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse [www.mi.com](http://www.mi.com).

---

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

