



Manual do usuário


Balança Corporal Inteligente S200

Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Utilizando o produto	05
03. Instalando o aplicativo	06
04. Medindo o peso	07
05. Precauções	08
06. Cuidados e manutenção	10
07. Solução de problemas	11
08. Especificações técnicas	11
09. Descarte ecológico	12
10. Canais de atendimento	13

Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

 **Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

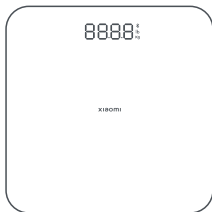


Balança Inteligente de Bioimpedância 2

01. Visão geral do produto

Esta balança foi projetada para fornecer dados de medição do peso para pessoas preocupadas com a saúde, perda de gordura e definição corporal.

Ela oferece diversos modos de pesagem, como pesagem com bebê, pesagem de pequenos objetos, medição de visitantes e teste de equilíbrio.

As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface do usuário apresentadas neste manual são apenas para referência. O produto e suas funções reais podem variar devido a melhorias no produto.

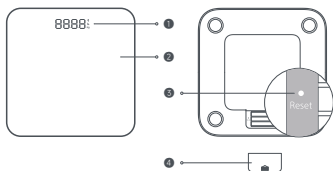

Componentes do produto:

1. Visor
2. Balança
3. Botão Reset
4. Tampa das pilhas

Dados de medição — 888.8 ^{lb}/_{kg}

Descrições do visor

	Ícone Bluetooth®: Quando o ícone permanece branco, isso indica uma conexão Bluetooth normal. Quando o ícone pisca em branco, isso indica que não há conexão Bluetooth.
	Quando a balança exibe este ícone, isso indica que o valor medido excede 150 kg.
	Nível de bateria baixo. Substitua as pilhas a tempo para evitar vazamentos causados por descarga excessiva.

Funções

- **Modo de pesagem de peso:** Suba na balança para medir o peso sem a necessidade de uma conexão Bluetooth.

- **Modo de pesagem de pequenos objetos:** Para pesar objetos de 0,1 kg ou mais após ativar a balança.

Nota: Para ativar a balança, suba suavemente sobre ela ou pressione sua superfície ao pesar pequenos objetos com menos de 5 kg. Em seguida, prossiga com a medição após o visor exibir 0,0 kg.

- **Pesagem com bebê/Teste de equilíbrio:** Ative o modo de pesagem com bebê ou teste de equilíbrio no aplicativo e siga as instruções no aplicativo para utilizar o modo.

Nota: Para utilizar funções como pesagem com bebê, teste de equilíbrio ou alteração da unidade da balança, é necessário conectar-se ao aplicativo.

- **Modo de pesagem offline:** Após vincular a balança pela primeira vez, os dados de pesagem podem ser salvos sem conectar-se ao telefone. Os dados serão carregados e salvos automaticamente no aplicativo Xiaomi Home quando a balança for conectada ao telefone novamente.

- **Medição de visitante:** Ative esta função no aplicativo e preencha as informações do visitante para realizar a medição. Os dados do visitante não serão salvos.

- **Compartilhamento do dispositivo:** Depois de vincular sua conta à balança, você poderá compartilhá-la com outros usuários no aplicativo. No entanto, sua conta,

como conta principal, precisa sair do aplicativo ou desativar o Bluetooth para se desconectar da balança primeiro. Em seguida, o usuário compartilhado poderá conectar-se à balança com sucesso. A função de compartilhamento do dispositivo está disponível apenas para contas Xiaomi.

- **Restaurar as configurações de fábrica:** Pressione e segure o botão de redefinição por 7 segundos para vincular novamente a balança ou restaurá-la às configurações de fábrica.


Notas:

- Para atualizações **Over-the-Air (OTA)**, conecte-se ao aplicativo e siga as instruções exibidas na tela.

02. Utilizando o produto

Abra a tampa na parte inferior da balança e insira pilhas AAA nas direções indicadas no compartimento de pilhas.

Instalando as baterias

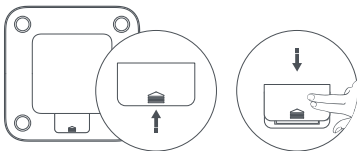

a. Vire a balança e abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira, conforme ilustrado.

b. Instale as pilhas e certifique-se de que os polos positivo

e negativo estejam instalados corretamente. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas. A balança será ligada automaticamente.

Notas:

- Após instalar as pilhas na balança, coloque-a sobre uma superfície rígida e plana e deixe-a parada por 30 segundos ou suba suavemente sobre sua superfície. Em seguida, use a balança após o visor exibir 0,0 kg.
- Após instalar as pilhas ou mover a balança, ela poderá exibir um valor mesmo quando não houver nada sendo pesado. Aguarde 5 segundos até que o visor se apague e, em seguida, suba suavemente na balança para ativá-la. Quando o visor exibir 0,0 kg, você poderá usar a balança novamente.

03. Instalando o aplicativo

Conexão com o aplicativo Xiaomi Home

Este produto funciona com o aplicativo Xiaomi Home*. Controle seu dispositivo com o aplicativo Xiaomi Home.

Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo. Você será direcionado à página de configuração da conexão caso o aplicativo já esteja instalado. Ou pesquise por "Xiaomi Home" na loja de aplicativos para baixá-lo e instalá-lo.



18884C52

Abra o aplicativo Xiaomi Home, toque em "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar seu dispositivo.

*Esta balança só pode ser pareada e conectada ao aplicativo Xiaomi Home.

Notas:

- A balança é compatível com Android 8.0 ou superior e iOS 13.0 ou superior.
- A versão do aplicativo pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.
- Abra o aplicativo Xiaomi Home e certifique-se de que seu dispositivo e a balança estejam conectados entre si via Bluetooth. Em seguida, você poderá visualizar os dados pelo aplicativo. Caso seu dispositivo esteja desconectado da balança, os dados de medição serão salvos na balança e só poderão ser visualizados no aplicativo após os dispositivos serem conectados novamente. Quando seu dispositivo não estiver conectado à balança, você poderá usar a função de gateway da balança para ler os dados. Certifique-se de que já exista um produto com capacidade de gateway Bluetooth ou um dispositivo gateway com a versão mais recente do firmware adicionado ao aplicativo. A balança se conectará automaticamente a ele e, então, você poderá visualizar os dados de medição no histórico do aplicativo.

04. Medindo o peso

a. Coloque a balança sobre uma superfície rígida e plana e certifique-se de que os pés da balança estejam em contato com o chão e nivelados.

b. Certifique-se de que a balança esteja conectada ao aplicativo ou gateway. Caso contrário, somente a medição de peso poderá ser realizada.

Posturas corretas para medição



Fique em pé, com os joelhos estendidos e os pés afastados.



Mantenha-se em pé naturalmente.

Posturas incorretas para medição



Mantenha os joelhos flexionados e os pés juntos.



Faça a medição enquanto estiver agachado.



Não fique em pé no centro da balança.

Nota:

Para obter mais instruções sobre as funções e consultar as perguntas frequentes, acesse **Configurações > Ajuda e feedback**, no canto superior direito do plug-in da balança no aplicativo.

05. Precauções

- Não mova os pés nem saia da balança durante a medição, a menos que seja necessário.
- Certifique-se de medir seu peso corporal no mesmo período e nas mesmas condições todos os dias.
- Use a balança em um ambiente seco. Não a utilize em ambientes úmidos, como banheiros.
- Não mergulhe a balança em água ou qualquer outro líquido.
- Não suba na balança para realizar a medição com os

pés molhados ou quando a superfície da balança estiver molhada, para evitar escorregões.

- Não use a balança em ambientes com temperaturas acima de 40 °C, abaixo de 0 °C ou próximos a campos magnéticos fortes. Mantenha-a afastada de fontes de água, fogo, umidade, poeira e ambientes corrosivos.

- Não a utilize próxima a aquecedores elétricos, micro-ondas, fornos, aquecedores de água, fogo, velas ou outras fontes de alta temperatura, para evitar afetar o desempenho da bateria e causar erros na balança.

- Não bata, aperte, deixe cair, arremesse ou risque a balança, pois impactos fortes podem causar danos à superfície da balança. Se a balança estiver danificada, interrompa imediatamente o uso e entre em contato com a equipe de serviço pós-venda. Não toque nem tente remover as peças danificadas.

- Siga as instruções deste manual do usuário para utilizar a balança corretamente.

Avisos de segurança sobre as pilhas

- Use somente pilhas alcalinas AAA seguras e qualificadas. Substituir a pilha pelo tipo incorreto pode resultar na falha da proteção de segurança, causando explosão ou incêndio.

- Não coloque a pilha em um ambiente com temperatura extremamente alta, como sob luz solar direta, próximo a fogo, forno ou micro-ondas. Caso contrário, isso pode fazer com que a pilha exploda, vazando líquidos inflamáveis ou gases.

- Não desmonte, bata, aperte ou corte a pilha. Nunca toque nem tente perfurar a pilha com objetos pontiagudos ou chaves de fenda. Caso contrário, a pilha poderá explodir.

- Não submeta a pilha a uma pressão de ar extremamente baixa; caso contrário, isso poderá fazer com que a pilha exploda ou vazando líquidos inflamáveis ou gases.

- Não engula a pilha para evitar queimaduras químicas.

- Se você acreditar que a pilha pode ter sido engolida ou colocada em alguma parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

- Se o compartimento das pilhas não estiver fechado com segurança, pare de usar a balança e mantenha-a longe de crianças. Mantenha as pilhas novas e usadas longe de crianças.

- Não descarte as pilhas como lixo doméstico. Descarte-as de forma segura, de acordo com as leis e regulamentações locais.

colocada em alguma parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

06. Cuidados e manutenção

- Limpe regularmente a balança com um pano macio, limpo e levemente umedecido (pode ser utilizado um detergente neutro) e, em seguida, seque a balança com um pano seco ou papel-toalha.

- Remova as pilhas antes de limpar a balança.

- Não use soluções corrosivas para limpar a balança; caso contrário, a balança poderá ser danificada, apresentar rachaduras ou descoloração.

- Não use equipamentos de aquecimento externos, como fornos de micro-ondas ou secadores de cabelo, para secar a balança.

- Não use pilhas danificadas ou com vazamento. Se a balança não for utilizada por um longo período (3 meses ou mais), remova as pilhas. Antes de usar a balança novamente, verifique se as pilhas estão intactas e sem vazamentos, superaquecimento ou deformações.

- Não desmonte nem modifique a balança e seus acessórios por conta própria.

- Não armazene nem transporte a balança e seus acessórios na mesma caixa que materiais inflamáveis e explosivos.

- Se a balança ficar superaquecida ou apresentar deformação, inchaço, ou se as pilhas vazarem durante o armazenamento, interrompa imediatamente o uso da balança e entre em contato com a equipe de serviço pós-venda.

07. Solução de problemas

Problemas	Possíveis causas	Soluções
A balança não liga ou não funciona normalmente	O nível da bateria está baixo ou insuficiente	Substitua as pilhas e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a equipe de serviço pós-venda.
A variação na pesagem é significativa	Há objetos estranhos nos pés da balança, obstruções nas bordas da balança ou a balança não está posicionada sobre uma superfície rígida e plana.	Remova quaisquer objetos estranhos ou obstruções ou mova a balança para uma superfície rígida e plana. Em seguida, pressione suavemente os quatro cantos com os dedos para garantir que a balança esteja posicionada de forma estável e faça a medição novamente.
	Você subiu na balança para realizar a medição antes que o visor exibisse 0,00 kg.	Ative a balança e faça a medição após o visor exibir 0,00 kg. Se houver um valor no visor, aguarde até que o visor se apague. Em seguida, ative a balança novamente e faça a medição após o visor exibir 0,00 kg.

08. Especificações técnicas

- Nome: Xiaomi Smart Scale S200
- Modelo: MJTZC02YM
- Dimensões do produto: 280 × 280 × 24,5 mm
- Temperatura de armazenamento: -30 °C a 70 °C
- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Umidade de armazenamento: 0%–90%
- Peso líquido: 1,2 kg
- Material do revestimento: Vidro temperado, plástico de engenharia
- Faixa de pesagem: 0,1–150 kg
- Divisão: 0,05 kg
- Unidades de pesagem: kg/lb
- Tensão nominal: 4,5 V (3 pilhas AAA)

- . Frequência de operação: 2402–2480 MHz
- . Potência máxima de saída de RF: $\leq 3,55$ dBm
- . Compatível com: Android 8.0 ou superior; iOS 13.0 ou superior
- . Conectividade sem fio: Bluetooth Low Energy 5.4
- . Data de fabricação: Consulte a embalagem

09. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

• Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

10. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.