



Manual do usuário

**Refil para Escova de  
Dente Elétrica  
Mi Electric Toothbrush T100**



## Sumário

<b>01.</b> Visão geral do produto	03
<b>02.</b> Como usar	03
<b>03.</b> Precauções	04
<b>04.</b> Avisos	04
<b>05.</b> Especificações	05
<b>06.</b> Descarte ecológico	05
<b>07.</b> Canais de atendimento	06



Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**



Refil para Escova de Dente Elétrica  
Mi Electric Toothbrush T100

## 01. Visão geral do produto




- Cerdas com agrupamento de alta densidade que possuem 20% a mais de filamentos e intensificam a limpeza;
- Formato arredondado e compacto, que facilita o alcance de escovação até mesmo nas regiões de difícil acesso;
- Higienização dos dentes e gengiva com suavidade, eficácia.

## 02. Como usar


### • Instalando o refil:

Fixe o refil da escova no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto.

O encaixe correto, garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor. Veja:

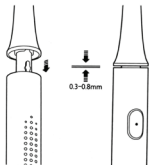

- Aplicando pasta de dente na escova:

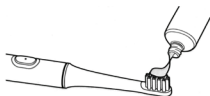

Molhe as cerdas da escova de dente e coloque a pasta sobre as mesmas.

- **Escove seu dente de forma saudável:**

Mova lentamente a escova de dente, enquanto mantém a angulação de 45° entre as cerdas e as linhas da gengiva.

- **Limpendo o refil:**

a. Após a escovação, posicione o refil embaixo de água corrente;

b. Após a limpeza, cubra as cerdas com a capa de proteção para mantê-las limpas e higienizadas.

### 03. Precauções

- Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incômodos. Isso acontece porque sua gengiva não está habituada com a eficiência desta escovação;
- Este sintoma, geralmente desaparece no período de 1 a 2 semanas;
- Se os incômodos persistirem após esse período, pare de usar sua Mi Electric Toothbrush T100 Head e procure um dentista;
- Recomendamos que use o modo de baixa intensidade de vibração inicialmente.

### 04. Avisos

Usuários que estiverem sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem

usar o produto sob orientação dos dentistas;

- Este produto foi criado apenas para limpezas de dentes, gengivas e língua;
- Não utilize para qualquer outro propósito;
- Se você sentir qualquer desconforto ou dor, imediatamente interrompa o uso do produto e consulte um dentista;
- O refil da escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas;
- Caso o refil apresente qualquer sinal de defeito, pare de utilizá-la imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.

## 05. Especificações técnicas

**Material:** Filamentos plástico, resistente a bactérias e fungos.

**Compatibilidade:** Mi Electric Toothbrush T100

## 06. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a

lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 07. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.