



Manual do usuário

# **Escova de Dentes Elétrica T200**



## Sumário

<b>01.</b> Precauções	04
<b>02.</b> Avisos	04
<b>03.</b> Informações de uso	05
<b>04.</b> Visão geral do produto	05
<b>05.</b> Como usar a escova	06
<b>06.</b> Solução de problemas	08
<b>07.</b> Especificações técnicas	09
<b>08.</b> Descarte ecológico	09
<b>09.</b> Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Escova de Dentes Elétrica T200

## 01. Precauções

Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir pequenos incômodos. Isso acontece, porque sua gengiva não está acostumada com a eficiência desta limpeza. Este sintoma geralmente desaparece em 1 ou 2 semanas. Se persistir após esse período, pare de usar sua Escova de Dente e procure um dentista.


## 02. Avisos

- Usuários que estão sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem usar o produto sob orientação de um profissional da área.
- Este produto foi criado apenas para limpeza de dentes, gengivas e língua. Não use para qualquer outro propósito.
- Se você sentir qualquer desconforto ou dor, pare o uso deste produto imediatamente e consulte seu dentista.

## 03. Informações de uso

- Não imerja a entrada de carregamento na água ou em qualquer outro líquido.
- Após a limpeza, cheque se o plug de energia da entrada de carregamento está completamente seco. Em seguida, conecte o plug à fonte de energia para recarregar.
- Este produto contém bateria interna recarregável. Não deixe a Escova de Dentes Elétrica T200 em ambientes que apresentam altas temperaturas.
- Caso a escova apresente qualquer sinal de defeito, pare de utilizá-la e entre em contato com a nossa central de atendimento.
- Não deixe a escova exposta ao sol.
- Esta escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas.
- Após o carregamento da escova, remova o carregador da fonte de energia.
- Não coloque objetos de metal no contato de carregamento quando estiver conectada a uma fonte de energia.

## 04. Visão geral do produto

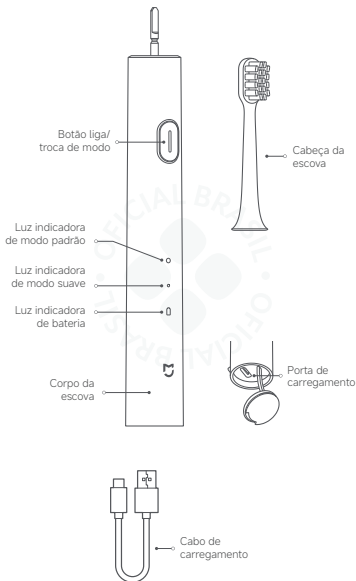

## 05. Como usar a escova

### Funções



**Ligando:** Aperte o botão para ligar.

**Troca de modos:** Após ligar a escova, em até 10 segundos, toque no botão para trocar o modo.

**Desligar:** Após ligar a escova, em até 10 segundos, se o dispositivo estiver no modo suave ou tiver sido selecionado para ele, um toque no botão irá desligar a escova, depois de 10 segundos com a escova ligada, um toque irá desligá-la.

**Função Memória:** Após usar um modo por mais de 10 segundos e desligar a escova, na próxima vez que for usá-la, ela irá ligar neste mesmo modo.

#### Luz indicadora do modo padrão

Modo padrão: Limpeza diária, remove de maneira eficaz placas bacterianas.


#### Luz indicadora do modo suave

Modo suave: Limpeza delicada, cuidado gentil com as gengivas.

### Instalando a cabeça da escova


Fixe a cabeça da escova de dente no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto.

(O encaixe correto, garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor).

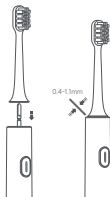

### Aplicando pasta de dente na escova

Molhe as cerdas da escova de dente com água e passe a pasta sobre as cerdas.

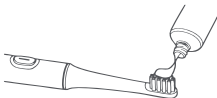

### Escovando seu dente de forma saudável

- a. Mova devagar a escova de dente, enquanto mantém um ângulo de  $45^\circ$  entre as cerdas da escova e as linhas da gengiva;
- b. Você pode pressionar o botão de Liga/Desliga durante a escovação, para alterar livremente o modo;
- c. Durante a escovação, a escova para de vibrar a cada 30 segundos para indicar que você a mude a posição.



### Limpando a cabeça da escova

Após escovar os dentes, enxágue a cabeça da escova em água corrente. A sujeira pode se acumular facilmente no espaço entre o cabo e a cabeça da escova, bem como na tampa protetora na parte inferior do cabo da escova de dentes; recomenda-se limpá-las regularmente. Observação: Não enxágue a cabeça da escova ou o cabo da escova de dentes com água a uma temperatura superior a  $65^\circ\text{C}$ , pois isso pode danificá-los.



## Carregando a escova

Quando a bateria estiver fraca (ex.: escova não ligando ou a luz indicadora de energia piscando em vermelho), abra a tampa protetora na parte inferior do cabo da escova, conecte o cabo de carregamento e ligue-o a uma porta USB, Powerbank ou a um carregador de tomada. A escova pode levar até 2 horas para carregar por completo.

Estado da escova	Porcentagem da bateria	Luz indicadora
Em funcionamento	100%-30%	Branco estático
	30%-10%	Vermelho estático
	<10%	A luz vermelha piscará 3 vezes e depois irá desligar não sendo possível ligar a escova
Carregando	100%	Branco estático
	30%-100%	Piscando em branco
	0%-30%	Piscando em vermelho

## 06. Solução de problemas

Falha	Causa da falha	Solução
A escova não liga	Bateria fraca ou sem energia	Carregue a escova de dentes
	Em estado de carregamento	Aguarde o término do carregamento da escova
A cabeça da escova não se encaixa corretamente no eixo	Há um objeto estranho no orifício da cabeça da escova	Remova e limpe quaisquer sujeiras ou objetos no orifício da cabeça da escova que possam estar impedindo o encaixe correto
	A cabeça da escova pode não ter sido instalada corretamente	Remova e instale a cabeça da escova corretamente



Falha	Causa da falha	Solução
A cabeça da escova não se encaixa corretamente no eixo	Não é uma cabeça de escova original	Compre uma cabeça de escova original
A vibração da escova está fraca	A cabeça da escova pode não ter sido instalado corretamente	Remova e instale a cabeça da escova corretamente
	Bateria fraca ou sem energia	Carregue a escova de dentes

## 07. Especificações técnicas

Nome do produto	Mi Electric Toothbrush T200
Tensão nominal de entrada	5V --- 0.5A
Potência nominal de entrada	2.5W
Tensão de operação	3.7V ---
Tempo de carregamento	Aproximadamente 2 horas
Classificação à prova d'água	IPX7

## 08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias

ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI importado e distribuído por ela em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201 ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



[www.dl.com.br](https://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. O produto real e as funções podem variar devido a melhorias do produto. Manual escrito pela **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.