



Manual do usuário

Aparelho removedor de cravos e espinhas Xiaomi inFace



Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Instruções de uso	04
03. Ponteiras	05
04. Cuidados pós limpeza facial	07
05. Recarregando a bateria	07
06. Avisos	07
07. Especificações técnicas	08
08. Descarte ecológico	09
09. Canais de atendimento	10




Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠️ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.



Aparelho removedor de cravos e espinhas Xiaomi inFace

01. Visão geral do produto

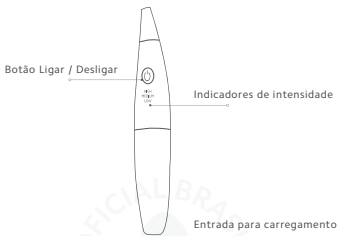

Funções:

- Limpeza profunda dos poros da pele, remoção de cravos, espinhas e resíduos de oleosidade;
- 3 níveis de intensidades: Baixa | Média | Alta.
- 2 modos de sucção diferentes:
 - Contínuo: identificado na cor azul, opera sem interrupções para realizar fortes sucções. Ideal para áreas que precisam de uma limpeza profunda;
 - Pulsação: identificado na cor laranja, alterna entre sugar e soltar de forma repetitiva. Ideal para áreas sensíveis.
- Botão de controle por toque (touch);
- Acompanha 4 ponteiros diferentes;

02. Instruções de uso

Teste alérgico:


- Antes de usar pela primeira vez, faça o teste alérgico ao produto. Para isso, siga as recomendações do item “Como utilizo meu dispositivo” em diante, e quando for utilizar o produto, faça uma limpeza em uma pequena região do rosto;
- Aguarde 20 minutos e se nesta região apresentar sinais da alergia, como coceira, lesões secas, vermelhidão, demarcações e comichão na pele, entre outros sinais anormais, não utilize o produto;
- Utilize compressa de gelo na região e procure um médico especialista;
- Lembre-se de não deixar a sucção por mais de 2 segundos em um único ponto.

Como utilizo meu dispositivo?

Higiene da pele: lave o rosto, o pescoço e a região próxima ao couro cabeludo com sabonete facial neutro, ou próprio para o seu tipo de pele antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza.

Dilatação dos poros: faça uma compressa com toalha quente por todo o rosto entre 3 a 5 minutos para abrir os poros, ou utilize o vapor de uma bacia cheia de água quente, aproximando o rosto próximo pelo mesmo tempo.

Nota: recomendamos para as áreas com grandes quantidades de cravos e espinhas, bem como a região do nariz, que mantenha uma segunda toalha quente entre 8 a 10 minutos para aumentar a eficiência da limpeza.

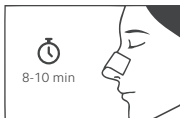

Utilizando o dispositivo para limpeza profunda:

- Verifique se o filtro anti entupimento não está sujo, e caso estiver realize a troca.
- Utilize o kit de filtros de esponja que acompanha o produto dentro da embalagem.

Nota: verifique o filtro antes do uso sempre, pois se o filtro estiver em condições ruins influencia no desempenho e eficiência da limpeza.



03. Ponteiros

O dispositivo acompanha 4 tipos diferentes de ponteiros. Cada uma delas possui funções específicas. Veja:



Ponteira com maior diâmetro do bocal (Sucção Forte): Indicado para cuidados diários da pele.

Recomenda-se utilizar no nariz, bochechas, lábios e nos contornos do rosto



Ponteira dedicado a remover espinha: Indicado para áreas mais sensíveis, possui efeito mais suave;




Ponteira Oval (Sucção Normal): Indicado para áreas mais oleosas, como a zona-T. Recomenda-se utilizar nas regiões menos sensíveis do rosto;



Ponteira com menor diâmetro de bocal (Sucção Baixa): Especialmente projetada para peles com espinhas. Possui bico exclusivo que auxilia na remoção de acnes.

Escolha a ponta ideal para cada aplicação e objetivo durante a limpeza.

Antes do uso, verifique se as ponteiros não estão sujas. Se estiverem, utilize um algodão/e ou cotonete com álcool para higienização.

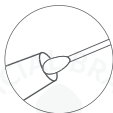

Antes de iniciar, realize os ajustes no aparelho para seu tipo de rosto. Siga as instruções abaixo:

- Faça um teste sugando a região da mão para verificar a intensidade e pressão.
- Ajuste o modo de operação (contínuo ou a vácuo). Para alternar entre os modos, pressione e segure por 3 segundos o botão Ligar/Desligar.
- Os níveis de intensidade (baixo, médio e alto) podem ser alternados pressionando uma vez o botão Ligar/Desligar.
- Realize a limpeza usando o dispositivo para remover os cravos, espinhas e outras impurezas através da sucção em cada ponto.



Nota: não aplique por mais de 2 segundos no mesmo local.

Para iniciar a limpeza, pressione o botão Ligar/Desligar para ligar. O aparelho iniciará automaticamente no modo 1 (contínuo) e com intensidade de sucção baixa.

04. Cuidados pós limpeza facial

- Lave o rosto com água corrente ou utilize uma toalha úmida para higienização.;
- Utilizar protetor solar diariamente;
- Higienizar a pele com produtos adequados e seguir as recomendações feitas pelo esteticista/dermatologista.

Atenção: Quando feita de maneira adequada, respeitando a resposta fisiológica de cada pessoa, a limpeza de pele não deixa marcas, lesões e traumas. Se algum hematoma surgir, pare de usar o produto e procure por um profissional especialista.

05. Recarregando a bateria

Como recarrego a bateria do meu dispositivo?

Utilize o carregador original que acompanha o produto em uma base de carregamento USB e conecte no dispositivo para iniciar o carregamento.

06. Avisos

- Este produto é exclusivo para o uso pessoal, não compartilhe com outros usuários.
- Carregue o produto totalmente antes do primeiro uso.
- Não use este produto em ambientes que apresentem altas temperaturas.
- Se o produto estiver deformado ou danificado, pare de usá-lo imediatamente.
- Este produto não deve ser utilizado nos olhos, pálpebras, aurículas, pescoço, veias e parte sensíveis do corpo, pois

pode causar danos a sua pele.

- Não utilize o produto na região das peles que possuem feridas e cicatrizes, regiões que receberam cirurgias em geral, incluindo cirurgia plástica e rinoplastia.
- Não submeta o produto em contato com líquidos químicos e água corrente.
- Se sua pele apresentar dor ou anormalidade, pare de usar imediatamente.
- Mantenha o produto limpo e desligado.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Não é permitido o uso do produto por crianças.
- Não utilize o produto próximo ao material inflamável (álcool, gasolina, removedor de esmalte, spray, entre outros).
- O produto não é a prova d'água. Não guarde no banheiro ou em outros locais com alta umidade.
- Não desmonte ou repare o produto você mesmo. Entre em contato com o serviço de pós-venda.

Nota: Não é recomendado o uso do produto em pessoas alérgicas, com doenças de pele, dermatite, alergias na pele e queimaduras solares graves, com lesões na pele, eczema, inchaço etc.

07. Especificações técnicas

Nome: inFace Blackhead Remover

Modelo: MS7000

Dimensões: 183mm×35mm

Peso: 135g

Capacidade da bateria: 400mAh

Corrente de carregamento: 300mA

Voltagem de carregamento: 5VDC

Tempo aproximado de carregamento: 2H

Corrente em stand-by: 40uA

Faixa de temperatura de uso: 0°C – 40°C

Material: Spray transparente para PC fosco UV e Policarbonato

Taxa de pressão da sucção: 60kpa-70kpa

08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.