



Mi Smart Electric Toothbrush T500 head (Gum Care)

## **Refil para Escova de Dentes Elétrica Xiaomi T500**

Manual do Usuário

### Sumário

---

1. Precauções
2. Aviso
3. Visão Geral do Produto
4. Como usar
5. Especificações Técnicas
6. Descarte Ecológico
7. Canais de Atendimento

**Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.**

## 1 - Precauções

---

Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir incômodos. Isso acontece porque sua gengiva não está habituada com a eficiência desta escovação. Este sintoma, geralmente desaparece no período de 1 a 2 semanas. Se os incômodos persistirem após esse período, pare de usar sua Mi Smart Electric Toothbrush T500 e procure um dentista. Recomendamos que use o modo de baixa intensidade de vibração inicialmente.

## 2 - Avisos

---

**a.** Usuários que estiverem sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem usar o produto sob orientação dos dentistas.

**b.** Este produto foi criado apenas para limpezas de dentes, gengivas e língua. Não utilize para qualquer outro propósito. Se você sentir qualquer desconforto ou dor, imediatamente interrompa o uso do produto e consulte um dentista.

**c.** O refil da escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas.

**d.** Caso o refil apresente qualquer sinal de defeito, pare de utilizá-la imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.

### 3 - Visão Geral do Produto

---

Mi Smart Electric Toothbrush T500 Head;




### 4 - Como Usar

---


#### a. Instalando a Mi Smart Electric Toothbrush T500 Head

Fixe a Mi Smart Electric Toothbrush T500 Head no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto.

(O encaixe correto, garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor.)

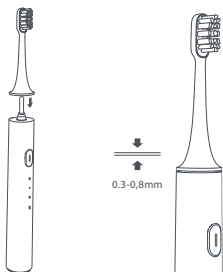

## b. Aplicando pasta de dente na escova

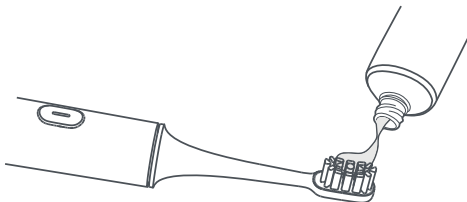

Molhe as cerdas da escova de dente e passe a pasta sobre as mesmas.

## c. Escove seu dente de forma saudável

- Mova lentamente a escova de dente, enquanto mantém a angulação de 45° entre as cerdas e as linhas da gengiva.

## d. Limpando a Mi Smart Electric Toothbrush T500 Head

- Após a escovação, posicione a Mi Smart Electric Toothbrush T500 Head embaixo de água corrente;
- Após a limpeza, cubra as cerdas com a capa de proteção para mantê-las limpas e higienizadas.

## 5 - Especificações Técnicas

---

**Material:** Filamentos da DuPon, testado e aprovado pelo FDA.

**Compatibilidade:** - Mi Electric Toothbrush; - Mi Electric Toothbrush T300; - Mi Electric Toothbrush T500

## 6 - Descarte Ecológico

---

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 7 - Canais de Atendimento

---

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.